

# LifenaXX® \* Kasutusjuhend

## Infrapuna termomeeter LX-017

Selle seadme vastavusdeklaratsiooni leiate lingilt [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (alumisel ribal "Konformitätserklärung"). Enne seadme esmakordset kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Tehnilise toe telefoninumber: 01805 013643 (Saksamaa lauatelefonidelt 14 senti minutis ja mobiilsidevõrkudest 42 senti minutis).

Tasuta e-post: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks või toote edasiandmise juhuks hoolikalt alles. Toimige samamoodi toote algtarvikutega. Garantii korral pöörduge edasimüüja poole või kauplusse, kust selle toote ostsite.

**2-aastane garantii**

### Tehnilised spetsifikatsioonid

Mõõtepiirkond	32 °C kuni 42,9 °C
Täpsus	+/- 0,2 °C
LCD eraldusvõime	0,1 °C
Hoiutingimused	-25 ~ 55 °C
Toide	DC 1,5 V (2 x AAA patareid)
Energiatarbimine	<45 mW
Patareihoiatus	Tühjeneva patarei hoiatus
Mälu	32 mõõdetud väärtust
Näidik	°C/°F
Väljalülitus	5 s järel

### Tavakasutus

Vajutage termomeetri sisselülitamiseks nuppu 1 sekund. Seade sooritab lühikese enesetesti: kõiki näidiku elemente kuvatakse umbes 1 sekund. Pärast edukat enesetesti **mõõtk** laubal **kehatemperatuuri**.


Pange tähele, et laubal/meelekohtadel ei tohi olla higi ega kosmeetikat ja et vasokonstriktiivsete ravimite võtmine ja nahaärritused võivad moonutada tulemust laubal temperatuuri mõõtes. Vajutage termomeetri sisselülitamiseks nuppu 1 sekund. Pärast edukat enesetesti kuvatakse seadme näidikul kogu teave.

Hoidke termomeetrit lauba esiosast 3–5 cm kaugusel, vajutage nuppu 1.

Seejärel vabastage nupp. Mõõtmisaja lõpust antakse märku lühikese piiksuga ja mõõdetud väärtus kuvatakse näidikul.

## HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD:

Ainult täiskasvanutele; kasutage ainult kaasasolevaid tarvikuid. Ärge kasutage seadet õhu, hapniku või lämmastikoksiidiga tuleohtliku anesteetikumi ega tuleohtlike ainete, aurude või gaaside läheduses. Ärge kasutage seadet kütteavade läheduses ega otsese päikesevalguse käes. Hoidke seadet kuivana ja lülitage välja, kui ei kasuta. Ärge kastke seadet vette.

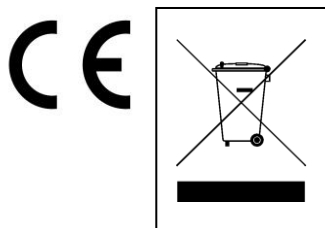

**Keskkonnakaitse näpunäited:** pakendimaterjalid on toorained ja neid saab ringlusse võtta. Ärge visake vanu seadmeid ega patareisid olmeprügi hulka. **Puhastamine:** kaitske seadet saastumise ja reostuse eest (kasutage puhast riiet). Hoiduge karedate, jämedateraliste materjalide või lahustite/ sööbivate puhastusvahendite kasutamisest. Pühkige puhastatud seade hoolikalt üle. **Turustaja:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany

**Maaletooja:** Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811, [www.terviseabi.ee](http://www.terviseabi.ee)

# LifenaXX® \* Kasutusjuhend

## Infrapuna termomeeter LX-017

Selle seadme vastavusdeklaratsiooni leiате lingilt [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (alumisel ribal “Konformitätserklärung”). Enne seadme esmakordset kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Tehnilise toe telefoninumber: 01805 013643 (Saksamaa lauatelefonidelt 14 senti minutis ja mobiilsidevõrkudest 42 senti minutis).

Tasuta e-post: [support@technaxx.de](mailto:support@technaxx.de)

Hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks või toote edasiandmise juhuks hoolikalt alles. Toimige samamoodi toote algtarvikutega. Garantii korral pöörduge edasimüüja poole või kauplusse, kust selle toote ostsite.

**2-aastane garantii**

### Tehnilised spetsifikatsioonid

Mõõtepiirkond	32 °C kuni 42,9 °C
Täpsus	+/- 0,2 °C
LCD eraldusvõime	0,1 °C
Hoiutingimused	-25 ~ 55 °C
Toide	DC 1,5 V (2 x AAA patareid)
Energiatarbimine	<45 mW
Patareihoiatus	Tühjeneva patarei hoiatus
Mälu	32 mõõdetud väärtust
Näidik	°C/°F
Väljalülitus	5 s järel

### Tavakasutus

Vajutage termomeetri sisselülitamiseks nuppu 1 sekund. Seade sooritab lühikese enesetesti: kõiki näidiku elemente kuvatakse umbes 1 sekund. Pärast edukat enesetesti **mõõtkе laubal kehatemperatuuri**.


Pange tähele, et laubal/meelekohtadel ei tohi olla higi ega kosmeetikat ja et vasokonstriktiivsete ravimite võtmine ja nahaärritused võivad moonutada tulemust laubal temperatuuri mõõtes. Vajutage termomeetri sisselülitamiseks nuppu 1 sekund. Pärast edukat enesetesti kuvatakse seadme näidikul kogu teave.

Hoidke termomeetrit lauba esiosast 3–5 cm kaugusel, vajutage nuppu 1.

Seejärel vabastage nupp. Mõõtmisaja lõpust antakse märku lühikese piiksuga ja mõõdetud väärtus kuvatakse näidikul.

## HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD:

Ainult täiskasvanutele; kasutage ainult kaasasolevaid tarvikuid. Ärge kasutage seadet õhu, hapniku või lämmastikoksiidiga tuleohtliku anesteetikumi ega tuleohtlike ainete, aurude või gaaside läheduses. Ärge kasutage seadet kütteavade läheduses ega otsese päikesevalguse käes. Hoidke seadet kuivana ja lülitage välja, kui ei kasuta. Ärge kastke seadet vette.

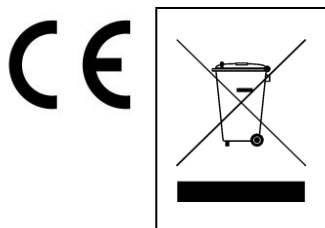

**Keskkonnakaitse näpunäited:** pakendimaterjalid on toorained ja neid saab ringlusse võtta. Ärge visake vanu seadmeid ega patareisid olmeprügi hulka. **Puhastamine:** kaitske seadet saastumise ja reostuse eest (kasutage puhast riiet). Hoiduge karedate, jämedateraliste materjalide või lahustite/ sööbivate puhastusvahendite kasutamisest. Pühkige puhastatud seade hoolikalt üle. **Turustaja:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany

**Maaletooja:** Tervise Abi OÜ, Ädala tn 11, Tallinn 10614, tel 6737811, [www.terviseabi.ee](http://www.terviseabi.ee)